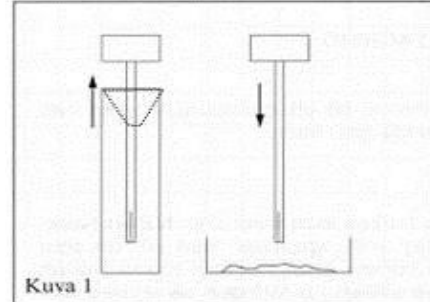


26.6.2020

Patient Instruction: Sampling for fecal occult blood test

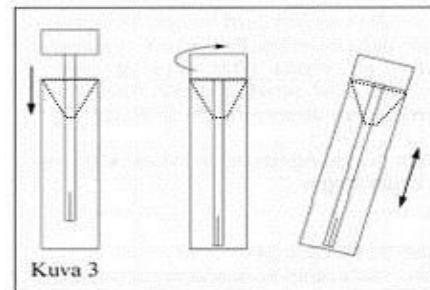
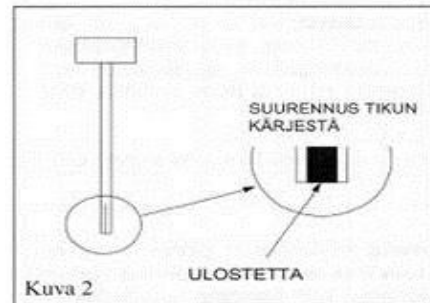
actim™ Fecal Blood Test, Cat 30371EETAC, Cat 30372ETAC, Cat 30331ETAC

1. Collect the feces sample to clean container or toilet paper.
2. Open the diluent container carefully. Hold tightly of the lid. Dip the end of sampling stick on the feces sample and roll it in the different parts of the sample. Two small notches in the end of the sampling stick should be filled with feces sample. (Fig 1).
3. Wipe the excess of the sample from the stick with the toilet paper. There is a sufficient amount of sample when the both notches are filled with the sample. (Fig 2).



Excess feces sample in the notches will disturb the analysis.

4. Place the sampling stick into the diluent container by pushing the stick through the cone and close the lid carefully. Shake the diluent container carefully until the feces sample blends into the diluent. (Fig.3).
5. Label the container with your name, social security number and the sampling date. Deliver the sample container to the laboratory as soon as possible after the sampling. Keep the container refrigerated prior to delivery. The sample should be delivered to the laboratory within one week (7 days).

**Notice!**

- **If you are instructed to take multiple samples, take those on different days (one sample/day).**
- Diluent in the container contains <math><0.1\%</math> NaN₃. It is toxic, do not drink it.
- Sample should not be taken during the menstruation.

Ilmoittakaa näytteenottajalle, jos ette ole voineet noudattaa tätä potilasohjetta tai jos olette saaneet tästä poikkeavia erityisohjeita.

Tutkimuksiin tai tuloksiin liittyviin kysymyksiin vastaa oma lääkäriinne tai hoitajanne. Laboratorio vastaa näytteenottoon liittyviin kysymyksiin.