


Näytteenotto-ohje potilaan itse ottamalle peräsuolen eli rektumin klamydia- ja tippurinäytteelle (-CtGcNhO) käyttäen cobas PCR Media Dual Sample Packet näytteenottovälinettä

Näytesetti sisältää kaksi näytetikkuä, joista käytetään vain paksumpaa, valkoista tikkua. Käsittele näyteputkea varovasti, sillä sen sisältämä neste aiheuttaa ärsytystä iholla. Mikäli nestettä roiskuu iholle, pese ihoalue välittömästi vedellä ja saippualla. Jos nestettä roiskuu silmiin, huuhto silmiä runsaalla vedellä ja ota yhteyttä terveyskeskukseen.

Älä kostuta näytetikkuä kuljetusnesteellä tai muulla nesteellä ennen näytteenottoa.

Näytteenotto vaiheittain: Avaa näytteenottopakkaus ja sen sisällä oleva näytetikkupakkaus

1. Ota paksumpi näytteenottotikku käteesi (kuva 1). Työnnä näytteenottotikku 3-5 cm syvälle peräaukkoon. Pyörittele tikkua 10 sekunnin ajan painaen sitä peräsuolen limakalvoja vasten. Näyte pyritään ottamaan siis limakalvolta välttämättä ulostetta. Jos näytteenottotikkua tarttuu siinä määrin ulostetta, että se on paljain silmin havaittavissa, on näytteenotto uusittava, koska uloste häiritsee tutkimuksen suorittamista. Vedä näytetikku ulos peräsuolesta. Älä laske tikkua pois käsistäsä ja varo koskettamasta näytetikulla mitään muuta. Samalla kun pidät näytetikkuä toisessa kädessä kierrä kuljetusputken korkki auki. Pidä putkea pystyasennossa, jotta neste ei läiky putkesta ulos.
2. Työnnä näytetikku kuljetusputken niin syvälle, että tikun varren musta merkkiviiva on kuljetusputken yläreunan kohdalla (kuva 2). Tällöin näytetikun alaosa on lähellä nestepintaa.
3. Katkaise näytetikun alaosa kuljetusputken painamalla näytetikkuä kuljetusputken reunaa vasten (kuva 3). Näytetikun alaosa tipahtaa tällöin kuljetusnesteeseen. Käteen jäävän varrenpätkän saa laittaa roskeeseen. Sulje kuljetusputken kierrekorkki huolellisesti siten, että putki ei vuoda kuljetuksen aikana.
4. Huomioi, että näytetikku jää kuljetusputken (kuva 4). Jos tikkua ei ole putkessa, näytettä ei voi tutkia.

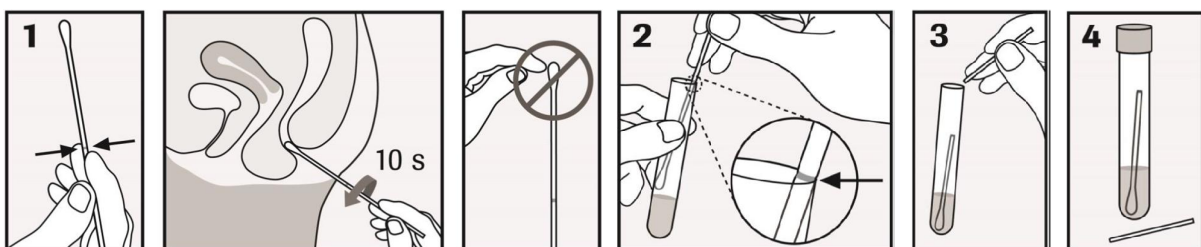

Ilmoittakaa näytteenottajalle, jos ette ole voineet noudattaa tätä potilasohjetta tai jos olette saaneet tästä poikkeavia erityisohjeita.

Tutkimuspyyntöihin tai tuloksiin liittyvissä kysymyksissä voitte ottaa yhteyttä hoitoyksikköön.

Näytteenottoon liittyvissä kysymyksissä voitte ottaa yhteyttä laboratorioon.

| | |
|---------------------------|--|
| Hoitoyksikön yhteystiedot | |
| Laboratorion yhteystiedot | |