


## Näytteenotto-ohje potilaan itse ottamalle vaginan klamydia- ja tippurinäytteelle (-CtGcNhO) käyttäen cobas PCR Media Dual Sample Packet näytteenottovälinettä

- Näytesetti sisältää kaksi näytetikkuä, joista käytetään vain paksumpaa, valkoista tikkua. Toinen, ohuempi näytetikku jää käyttämättä, mutta jos paksumpi näytteenottotikku tipahtaa esim. lattialle, voit ottaa näytteen jäljelle jääneellä ylimääräisellä ohuemmalla tikulla.
- Käsittele näyteputkea varovasti, sillä sen sisältämä neste aiheuttaa ärsytystä iholla. Mikäli nestettä roiskuu iholle, pese ihoalue välittömästi vedellä ja saippualla. Jos nestettä roiskuu silmiin, huuhto silmiä runsaalla vedellä ja ota yhteyttä terveyskeskukseen.
- Alapesua EI saa suorittaa ennen näytteenottoa. Kuukautisten aikaan EI voi ottaa ottaa näytettä.
- Älä kostuta näytetikkuä kuljetusnesteellä tai muulla nesteellä ennen näytteenottoa.

**Näytteenotto vaiheittain:** Avaa näytteenottopakkaus ja sen sisällä oleva näytetikkupakkaus

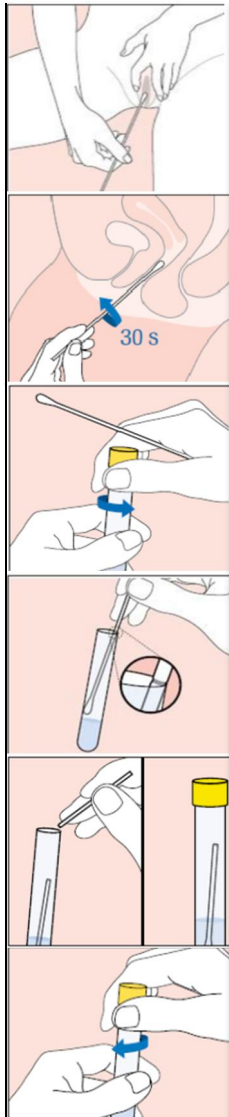

1. Ota paksumpi kuiva näytetikku käteesi ja levitä toisella kädellä ihopoimuja emättimen ulkosuun ympäriltä. Varo koskemasta näytetikulla muuta kuin varsinaista näytteenottoaluetta.
2. Työnnä näytetikku 5 cm syvyydelle emättimeen. Pyöritä tikkua sormien välissä 30 sekunnin ajan painellen tikkua emättimen seinämiä vasten. Vedä näytetikku ulos emättimestä. Älä laske tikkua pois käsistäsi ja varo koskettamasta näytetikulla mitään muuta.
3. Samalla kun pidät näytetikkuä toisessa kädessäsi kierrä kuljetusputken korkki auki. Pidä putkea pystyasennossa, jotta neste ei läiky putkesta ulos.
4. Työnnä näytetikku kuljetusputkeen niin syväälle, että tikun varren musta merkkiviiva on kuljetusputken yläreunan kohdalla. Tällöin näytetikun alaosa on lähellä nestepintaa.
5. Katkaise näytetikun alaosa kuljetusputkeen painamalla näytetikkuä kuljetusputken reunaa vasten. Näytetikun alaosa tipahtaa kuljetusnesteeseen. Käteen jäävän varrenpätkän saa laittaa roskiin.
6. Sulje kuljetusputken kierrekorkki huolellisesti siten, että putki ei vuoda kuljetuksen aikana. Huomioi, että näytetikku jää kuljetusputkeen. Jos tikkua ei ole putkessa, näytettä ei voida tutkia.

Ilmoittakaa näytteenottajalle, jos ette ole voineet noudattaa tätä potilasohjetta tai jos olette saaneet tästä poikkeavia erityisohjeita.

Tutkimuspyyntöihin tai tuloksiin liittyvissä kysymyksissä voitte ottaa yhteyttä hoitoyksikköön.

Näytteenottoon liittyvissä kysymyksissä voitte ottaa yhteyttä laboratorioon.

Hoitoyksikön yhteystiedot	
Laboratorion yhteystiedot	