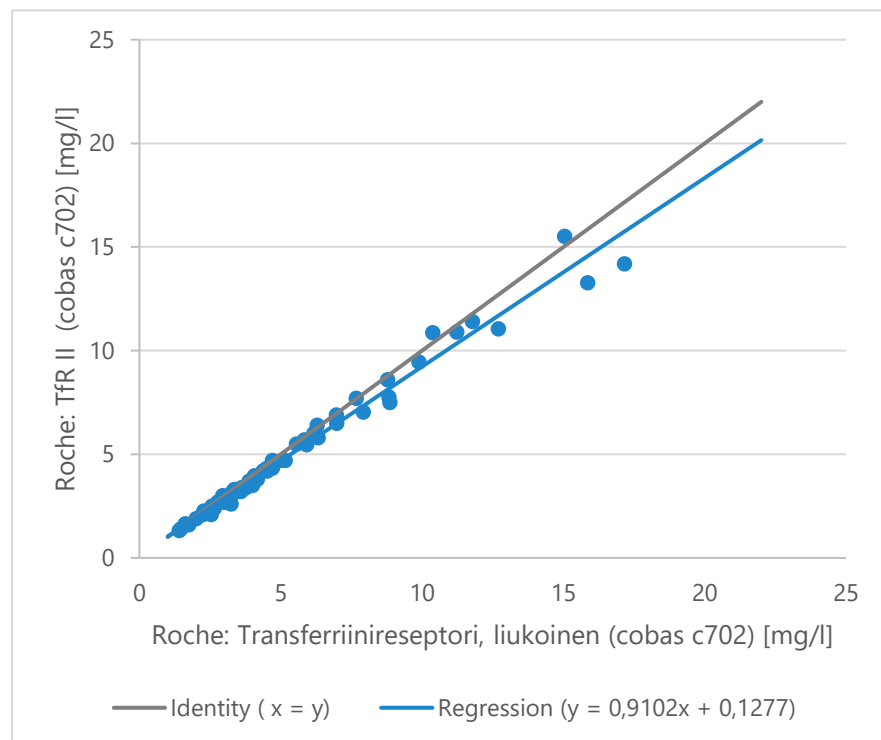


3.2.2022

Transferriniireseptoritutkimuksen tulostaso ja viiteväli muuttuvat 15.2.2022 alkaen**Tutkimus****1949 S -TfR, Plasman transferriniireseptori****Asia**

Liukoisen transferriniireseptorin menetelmä muuttuu. Uuden (Roche sTfR II) menetelmän herkkyys häiriötekijöille on vähentynyt. Uuden menetelmän tulostaso laskee n. 7 % viitevälin pitoisuusalueella. Viiteväliä korkeammalla pitoisuusalueella tulostaso voi laskea enemmän (Kuva 1). Tutkimuksen aikuisten viitevälit päivittyvät ja erilliset naisten ja miesten viitevälit poistuvat. Lasten viitevälit säilyvät ennallaan.

Näytteen säilytys- ja lähetysohjeet pysyvät ennallaan.

**Uudet viitearvot**

Aikuiset 1.7 – 4.1 mg/l (vanha viiteväli Naiset 1.9 – 4.4 mg/l; Miehet 2.2 – 5 mg/l)

Tulkinta

Katso ohjekirja

Päivi Ylikangas
johtava ylilääkäri
ISLAB

Sanna Kaikkonen
sairaalakemisti
ISLAB

Jarkko Romppanen
osastonylilääkäri
ISLAB

Esa Hämäläinen
professori
ISLAB/Itä-Suomen yliopisto



3.2.2022

Jakelu

ISLABin aluelaboratorioiden johtajat

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin sairaalat ja terveyskeskukset

Siun soten sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän sairaalat ja terveyskeskukset

Essote Etelä-Savon sosiaali- ja terveystieteiden kuntayhtymä sairaalat ja terveyskeskukset

Itä-Savon sairaanhoitopiirin sairaalat ja terveyskeskukset

OA:KEMAUT

Internet, intranet