

COVID-19 (SARS-CoV-2) hengitystienäytteenotto

24.3.2020


COVID-19 (SARS-CoV-2): hengitystienäytteenotto -CV19NhO-tutkimukseen**Tutkimuspyyntö**

6466 -CV19NhO -COVID-19-koronavirustauti, nukleiinihappo (kval)

Näytteet ottaa hoitoyksikön henkilökunta sairaanhoitopiiriin ohjeistuksen mukaisesti suojautuneena. Katso erillinen näytteiden pakkausohje: VARMISTETTU/EPÄILTY COVID-19: LABORATORIONÄYTTEIDEN KÄSITTELY NÄYTTEENOTON JÄLKEEN HOITOYKSIKÖISSÄ

Tikkunäyte nenänielusta ja/tai nielusta

Näytteenottotikku (nylonnukkatikku) työnnetään alaviistoon nenänpohjaa pitkin sieraimen noin 12-15 cm syvyyteen (syvyys mitataan etukäteen, sierain-korvannipukka; aikuisilla aina yli 10 cm, alle 2-vuotiailla lapsilla 6-7 cm) ja kiertoliikkeellä hangataan limakalvoja siten, että tikkuun tarttuu limakalvosta irronneita soluja. Tikku katkaistaan virusnäytteiden COPAN UTM-RT -kuljetusputkeen TAI kierrekorkilliseen putkeen, jossa 1-2 ml keittosuolaa.

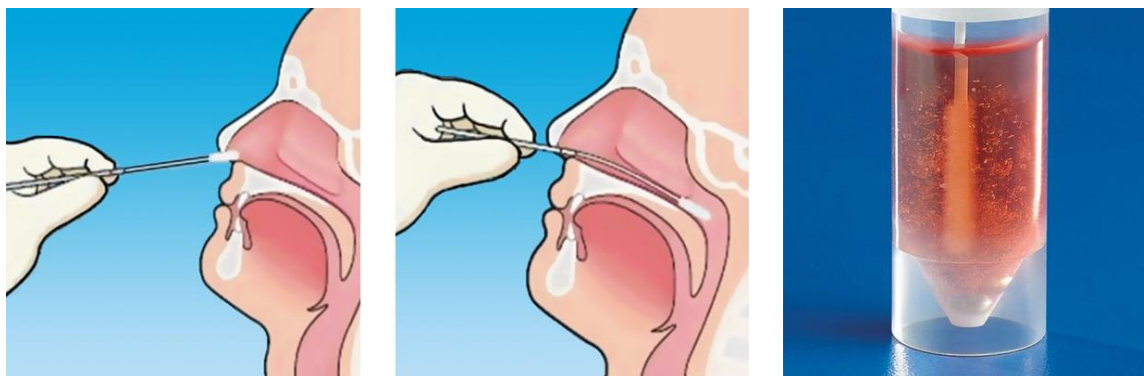

Vuotoherkiltä potilailta tai tilanteen niin vaatiessa, voidaan ottaa tikkunäyte sieraimesta 3 - 5 cm:n syvyydestä ja erillisellä tikulla nielukaarista. Molemmat tikut katkaistaan samaan virusnäytteiden COPAN UTM-RT -kuljetusputkeen / keittosuolaputkeen.

Nenänieluilmunäytteen ottaminen

Tarvittaessa voidaan sieraimia kostuttaa noin 2 ml keittosuolaa. Imuun kytketyn limanäyteputken letku työnnetään nenän kautta nenänieluun ja näyteputkeen imetään limaa molemmista sieraimista.

Alahengitystienäyte

Yskös tai BAL sellaisenaan steriilissä tiiviissä näyteastiassa.