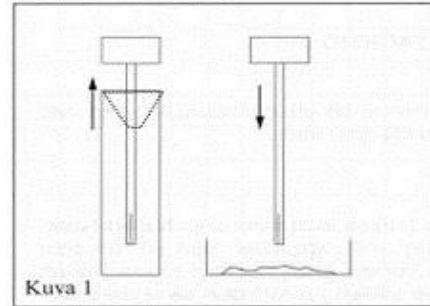


26.6.2020

Näytteenotto ulosteen piilevän veren tutkimista varten (F -hHb-O, 3813)

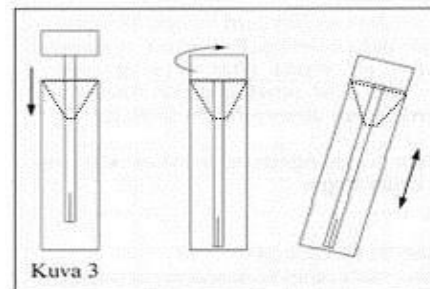
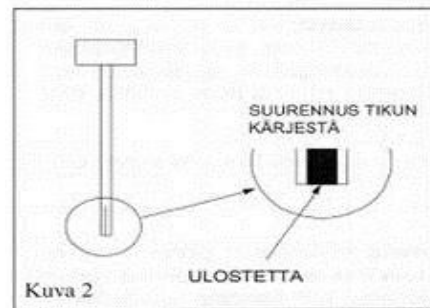
actim™ Fecal Blood Test, Cat 30371EETAC, Cat 30372ETAC, Cat 30331ETAC

1. Ottakaa ulostenäyte wc-paperiin tai puhtaan astiaan (kertakäyttöastia).
2. Aukaiskaa laimennospurkki (näytepurkki) ja ottakaa kiinni korkista, johon on kiinnitetty näytetikku. Pyörittäkää tikkua ulostenäytteen eri kohdissa siten, että tikun päässä olevat kaksi lovea täyttyvät (kuva 1).
3. Poistakaa ylimääräinen uloste tikusta esimerkiksi pyyhkimällä tikkua wc-paperilla. Näytteen määrä on riittävä silloin kun molemmat lovet sisältävät ulostetta (kuva 2).



HUOM! Älkää ottako liian isoa näytettä. Liian suuri ulostemäärä haittaa testin suoritusta.

4. Laittakaa näytteenottotikku takaisin putkeen työntämällä tikku kartion lävitse ja kiertäkää korkki kiinni huolellisesti (purkki ei saa vuotaa). Ravistakaa purkkia, jotta näyte sekoittuisi purkissa olevaan laimentimeen (kuva 3).
5. Merkitkää purkkiin henkilötietonne ja näytteenottopäivämäärä. Toimittakaa purkki laboratorioon mahdollisimman pian näytteenoton jälkeen. Näyte säilyy näytepurkissa jääkaappilämpötilassa laimennusnesteeseen sekoitettuna yhden viikon (7 vrk).

**HUOM!**

- Jos pitää ottaa useampi näyte, ottakaa ne eri päivinä.
- Näytettä ei pidä ottaa kuukautisten aikana.
- Laimennospurkissa olevaa nestettä ei saa juoda. Nesteessä on säilytysaineena <math><0.1\%</math> NaN₃

Ilmoittakaa näytteenottajalle, jos ette ole voinut noudattaa tätä potilasohjetta tai jos olette saanut tästä poikkeavia erityisohjeita.

Tutkimuksiin tai tuloksiin liittyviin kysymyksiin vastaa oma lääkärinte tai hoitajanne. Laboratorio vastaa näytteenottoon liittyviin kysymyksiin.