


12.6.2023

Virtsanäytteen siirto ohjaimen avulla säilöntäainetyhjiöputkiin


1 Näytteenottovälineet

- Tehdaspuhdas näytepurkki
- Ohjain. **Huom! Älä koske ohjaimen pilliin**, ettei käsistä siirry bakteereja näytteeseen. Ohjaimessa on neula, jota täytyy varoa.
- Näyteputki (1-3 kpl), joka sisältää säilöntäainetta ja tyhjiön. **Putken korkkia ei saa avata**, ettei tyhjiö häviä.

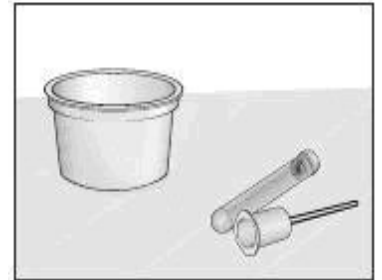

2 Virtsanäytteen siirto näyteputkeen

- Laita virtsaa sisältävä näytepurkki pöydälle.
- Laita ohjaimen pitkä pilli virtsanäytteeseen.
- Paina näyteputki korkki edellä ohjaimen neulaan ja pidä siinä, kunnes putki on täynnä.
- Kun putki on täynnä, poista se ohjaimesta.
- Sekoita putki heti kääntämällä se ylösalaisin 8-10 kertaa, jotta säilöntäaine sekoittuu näytteeseen.
- Kiinnitä nimitarra putkitarran päälle pitkittäin.
- Toimita putki laboratorioon huoneenlämmössä.
- Hävitä ohjain ja näytepurkki sekajätteissä.

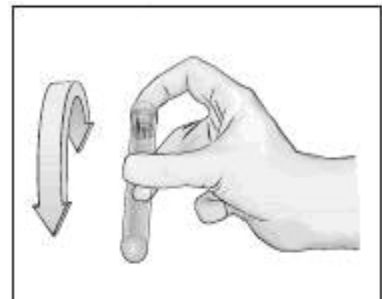

Ilmoittakaa näytteenottajalle, jos ette ole voineet noudattaa tätä potilasohjetta tai jos olette saaneet tästä poikkeavia erityisohjeita.

Tutkimuksiin tai tuloksiin liittyviin kysymyksiin vastaa oma lääkärinne tai hoitajanne. Laboratorio vastaa näytteenottoon liittyviin kysymyksiin (potilasasiakkaiden neuvontapuhelin 044 457 0740).